

お客様各位

## 「NOHCS吸引スポンジブラシ」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「NOHCS吸引スポンジブラシ」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具


### 対象品番

| 商品コード  | 商品名            | JANコード        | 変更ロット | 変更時期     |
|--------|----------------|---------------|-------|----------|
| 21-820 | NOHCS吸引スポンジブラシ | 4987458218200 | W1D   | 2021年10月 |

### 変更内容

- ・スイッチ部の吸気口を大きくします。
- ・変更前は吸引圧の上限を20kPaとして設計しており、それを超える圧力をかけると、スイッチをOFFにしても、先端から吸引されてしまう事象が発生しておりました。
- ・変更により、吸引圧の上限が60kPaになります。

現行

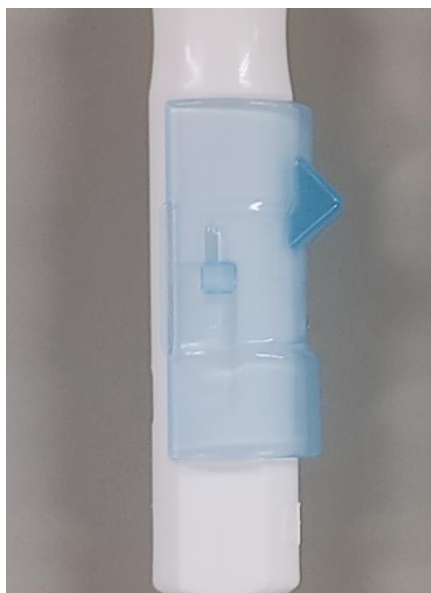

変更後

