

透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 VSV-7070-NP-3A ニードルレスアクセスポート仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」VSV-7070-NP-3A のニードルレスアクセスポートの仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

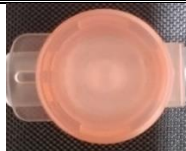
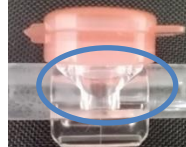
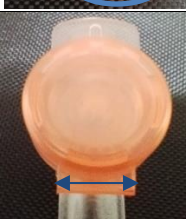
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

下記4か所の形状を変更いたします。材質と色の変更はありません。

青色ニードルレスアクセスポートも変更いたします。

	変更前	変更後
外観		
①ポート内部の形状変更		
②キャップ内側にガイドを追加		
③キャップ付け根部のヒンジ幅を拡大		
④キャップ付け根部のヒンジ形状変更		

変更理由

- ・アクセスポート内シリコンスリット部からのリーク対策のため、形状を変更しました。
- ・キャップの外れ対策のため、キャップの形状を変更いたしました。

変更開始ロット

23B26P ロット(2023 年 2 月製造分)