

「セーフタッチ®カニューラ GA」

仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度弊社では「セーフタッチ®カニューラ GA」(医療機器認証番号 218AABZX00037000)の仕様を一部、下記の通り変更いたします。変更内容について下記の通りになります。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


敬具

変更内容


○安全機構を変更致します。

マグネットタイプからフックタイプ変更になります。

安全機構内で磁力にてルアーキャップと嵌合していた箇所について、物理的に鍵のような機構で嵌合させるような仕様に変更します。

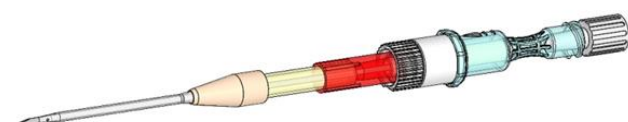


変更前

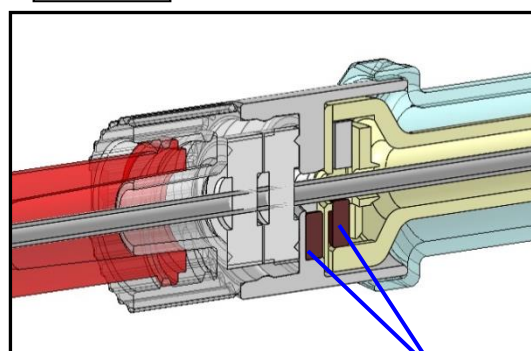

磁石

磁石の引き合いによって嵌合


変更後

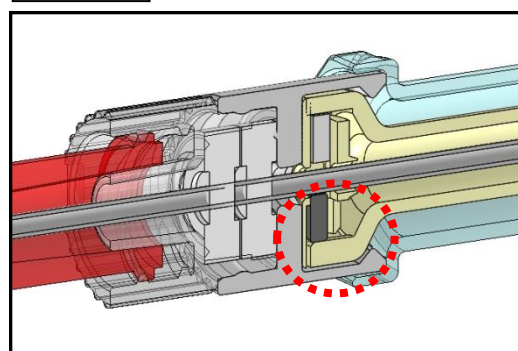

物理的に嵌合

○内針針基部が緑色になります。

内針針基部の色を透明から緑色に変更します。
内針針基部の色を緑色にすることで、穿刺者が把持する箇所を明確にすることが出来ます。明確にすることが出来れば、穿刺のミスを軽減することが可能になります。

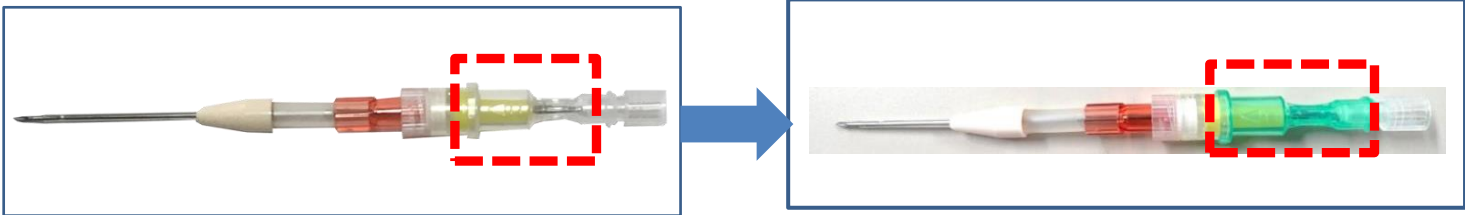

○商品コード、商品名の変更

明確に変更品か区別するため、別紙の通り商品コード、商品名が変更となります。

変更時期

商品コード (変更前)	商品名	JANコード (変更前)
69-553	NSL-14AC4×1・1/2PP RU GA	498745869553 7
69-554	NSL-15AC4×1・1/2PP RU GA	498745869554 4
69-555	NSL-16AC4×1・1/2PP RU GA	498745869555 1
69-556	NSL-17AC4×1・1/2PP RU GA	498745869556 8
69-558	NSL-14AC4×1・1/4PP RU GA	498745869558 2
69-559	NSL-15AC4×1・1/4PP RU GA	498745869559 9
69-560	NSL-16AC4×1・1/4PP RU GA	498745869560 5
69-561	NSL-17AC4×1・1/4PP RU GA	498745869561 2
69-563	NSL-14AC4×1PP RU GA	498745869563 6
69-564	NSL-15AC4×1PP RU GA	498745869564 3
69-565	NSL-16AC4×1PP RU GA	498745869565 0
69-566	NSL-17AC4×1PP RU GA	498745869566 7



商品コード (変更後)	商品名	JANコード (変更後)	変更時期
69-535	NSL*14AC4×1・1/2PP RUL GA	498745869535 3	2020年1月下旬
69-536	NSL*15AC4×1・1/2PP RUL GA	498745869536 0	2020年1月下旬
69-537	NSL*16AC4×1・1/2PP RUL GA	498745869537 7	2020年1月下旬
69-538	NSL*17AC4×1・1/2PP RUL GA	498745869538 4	2020年2月下旬
69-539	NSL*14AC4×1・1/4PP RUL GA	498745869539 1	2020年3月中旬
69-540	NSL*15AC4×1・1/4PP RUL GA	498745869540 7	2020年2月上旬
69-541	NSL*16AC4×1・1/4PP RUL GA	498745869541 4	2020年2月上旬
69-542	NSL*17AC4×1・1/4PP RUL GA	498745869542 1	2020年2月中旬
69-543	NSL*14AC4×1PP RUL GA	498745869543 8	2021年3月頃
69-544	NSL*15AC4×1PP RUL GA	498745869544 5	2020年2月上旬
69-545	NSL*16AC4×1PP RUL GA	498745869545 2	2020年1月下旬
69-546	NSL*17AC4×1PP RUL GA	498745869546 9	2020年2月下旬

※尚、現行品の在庫消尽の後に切替となります。