


末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット

ニプロPICCキット

新発売のご案内

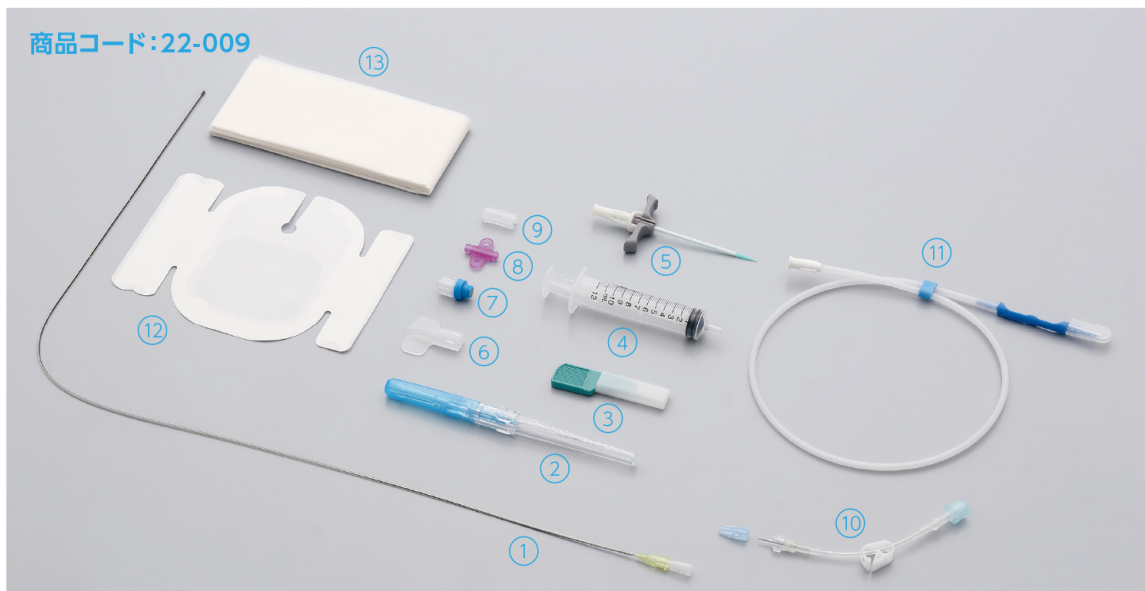

<商品コード: 22-009の場合>

 ①4.5Frカテーテル ②外套付穿刺針(22G×2インチ) ③スカルペル ④注射筒 ⑤イントロデューサ ⑥コネクタクッション
 ⑦STプラグ ⑧固定具 ⑨固定クリップ ⑩コネクタチューブ ⑪0.018インチガイドワイヤ(アングル) ⑫ドレッシング ⑬ドレップ

※キット内容は商品コードごとに異なります。

特 長

- カテーテル先端スリットバルブにより、注入・閉鎖・吸引が可能です。
- 2本のアラミド繊維で補強されたシリコン製カテーテル。
- 22G×2インチのプラスチックカニューラ穿刺針で安全で低侵襲なカテーテル留置をサポート。
- コネクタクッションにて、コネクタ部の固定を安心・安全にできます。
- カテーテルとコネクタの接続方法を新しくしました。

仕 様

 医療機器承認番号: 22300BZX00440000 高度管理医療機器(クラスⅣ)
 販売名: ニプロ PICC キット

商品コード	品番	カテーテル			外套付穿刺針	ガイドワイヤ	JANコード
		外径(mm)	有効長	プライミング量	外径(mm)×長さ	外径(mm)×長さ	
22-009	ニプロPICCキット PCV4.5-S-ST	4.5Fr(1.5mm)	600mm	0.45mL	22G(0.8mm)×2インチ(50mm)	0.018インチ(0.46mm)×450mm	4987458220098
22-013	ニプロPICCキット PCV4.5-S-IP						4987458220135

商品コード	品番	カテーテル			ピールオフカニューラ針(外套)	ピールオフカニューラ針(内針)	JANコード
		外径(mm)	有効長	プライミング量	外径(mm)×内径(mm)×長さ	外径(mm)×内径(mm)×長さ	
22-014	ニプロPICCキット PCV4.5-S-SC	4.5Fr(1.5mm)	600mm	0.45mL	14G(2.15mm)×1.73mm×33mm	1.65mm×1.48mm×45mm	4987458220142

■入数: 1セット/箱

発売時期

令和2年10月16日

但し、22-014 ニプロPICCキット PCV4.5-S-SCについては 令和3年1月頃予定