

お客様各位



単回使用透析用針「セーフタッチ®カニューラ GA」 仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度弊社では「セーフタッチ®カニューラ GA」（医療機器認証番号：218AABZX00037000）の仕様を下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。

敬具

変更点

【変更理由】 保護具(黄色部分)とフック部の嵌合強度を高めることで、内針抜去中の予期せぬ保護具外れを防ぎ、より確実に安全機構を作動させるため。


【変更内容】 フック部のスリット長を下記の通り変更いたしました。

	変更前	変更後
スリット長	4 mm	3 mm


【変更箇所写真】



変更前

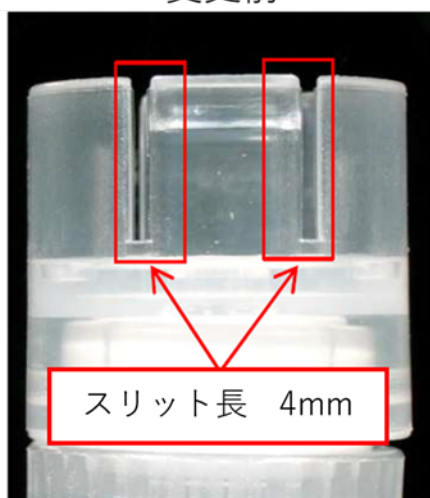

変更後

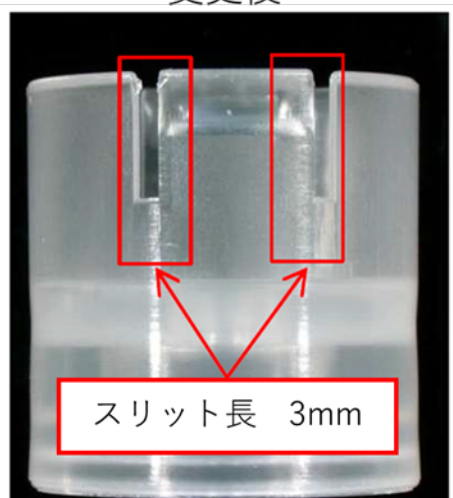

対象製品
変更時期

商品コード	品番	切替開始ロット	切替予測時期
69-544	NSL*15AC4x1 PP RUL GA	21J21U	2022 年 3 月下旬
69-540	NSL*15AC4x1 ・ 1/4 PP RUL GA	21J19U	2022 年 2 月中旬
69-536	NSL*15AC4x1 ・ 1/2 PP RUL GA	未定	未定
69-545	NSL*16AC4x1 PP RUL GA	21J16U	2022 年 4 月下旬
69-541	NSL*16AC4x1 ・ 1/4 PP RUL GA	21J23U	2022 年 2 月中旬
69-537	NSL*16AC4x1 ・ 1/2 PP RUL GA	21K04U	2022 年 4 月中旬
69-546	NSL*17AC4x1 PP RUL GA	21K08U	2022 年 3 月下旬
69-542	NSL*17AC4x1 ・ 1/4 PP RUL GA	21K05U	2022 年 3 月中旬
69-538	NSL*17AC4x1 ・ 1/2 PP RUL GA	21K07U	2022 年 3 月下旬

以上