

お客様 各位

2022 年 6 月



「ニプロ PICC キット」 一部品番 販売終了のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニプロ PICC キット」の一部品番に関して販売を終了いたしますので下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも弊社製品にご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬白

対象品番

商品コード	商品名	JAN コード	備考
22-008	PCV4.5FR-S	4987458220081	コネクタ取り付け方式：ネジ式 セーフタッチプラグ、インジェクションプラグ入り

- ・販売名 : ニプロ PICC キット
- ・医療機器承認番号 : 22300BZX00440000
- ・一般的名称 : 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット
- ・クラス分類 : クラスIV（高度管理医療機器）

販売終了理由

カテーテルと接続するコネクタの接続方式をより簡便なものに致します。

合わせて、品番を統合いたします。

後継推奨品番

商品コード	商品名	JAN コード	備考
22-009	PCV4.5-S-ST	4987458220098	コネクタ取り付け方式：はめ込み式 セーフタッチプラグ入り
22-013	PCV4.5-S-IP	4987458220135	コネクタ取り付け方式：はめ込み式 インジェクションプラグ入り

※カテーテルに取り付けるプラグによってご選択ください。

統合時期：2022 年 7 月中旬


次頁もご覧ください。

仕様変更


●コネクタ取り付け方式

先端弁付カテーテルに対するコネクタの取り付け方法が変わります。


販売終了対象品番

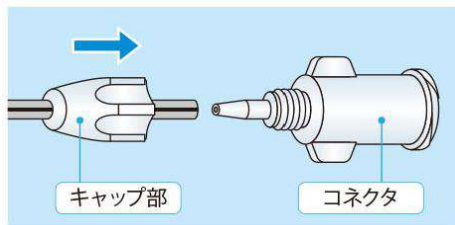


①コネクタにカテーテル本体を差し込む。

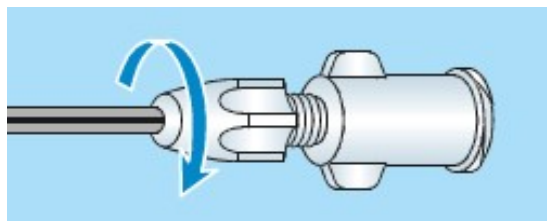


②キャップ部を右に回して、カテーテルに固定する。

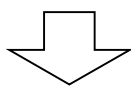

後継推奨品番

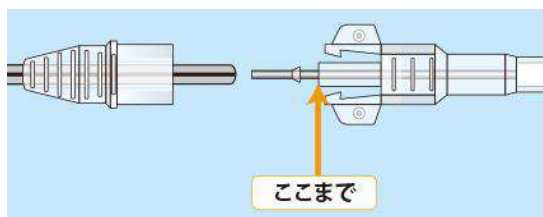

①コネクタチューブの先端部根元までカテーテル本体を差し込む。

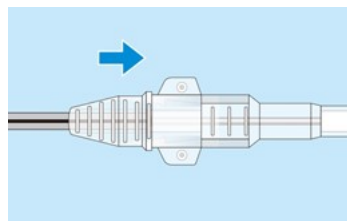

②コネクタキャップを真っ直ぐコネクタにはめ込む。

●スカルペル形状

販売終了対象品番



後継推奨品番



●包装形態

販売終了対象品番

トレイ：1重トレイ

入数：5セット/箱（最小出荷単位1箱）

後継推奨品番

トレイ：2重トレイ

入数：1セット/箱（最小出荷単位1箱）

以上