

# 「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」

## ツインエンド仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」（医療機器承認番号：16100BZZ01735000）の仕様を下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 変更内容

- 仕様変更対象製品：
- ツインエンド エンドホール型 通常キット
  - ツインエンド エンドホール型 フルキット
  - ツインエンド025 エンドホール型 通常キット
  - ツインエンド025 エンドホール型 フルキット
  - ツインエンド025 エンドホール型 通常キット セーフティコネクタータイプ
  - ツインエンド025 エンドホール型 フルキット セーフティコネクタータイプ

### ○変更内容・理由


血管壁へのへばりつきによる脱血不良トラブルを軽減するため、脱血側ルーメンの側孔(サイドホール)を1個から4個に変更致します。

### 【比較写真(全体)】

変更前




変更後

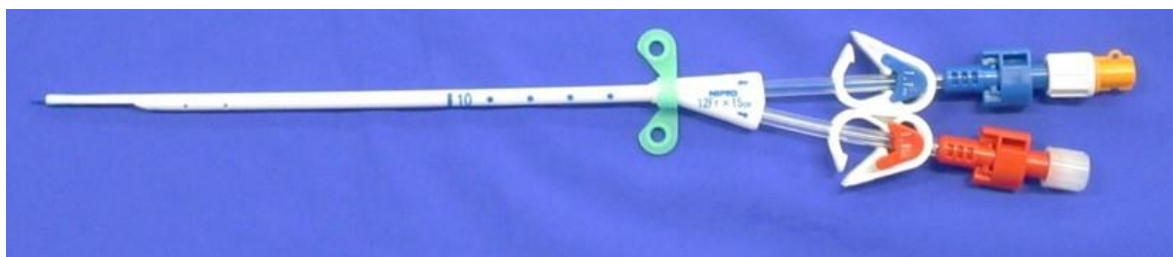


【比較写真(先端)】

変更前

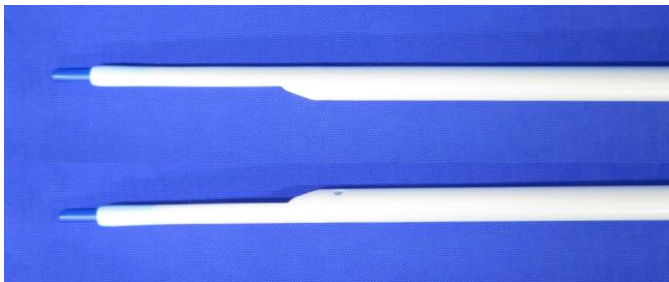


変更後

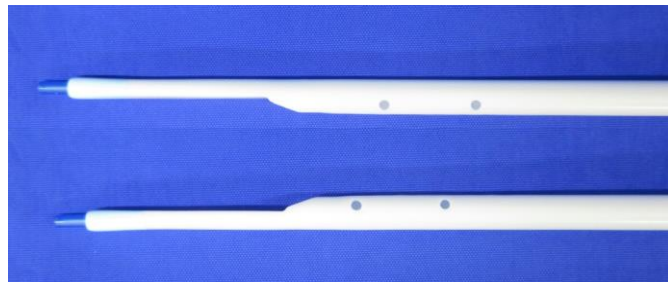

現行品と仕様変更品の識別として製品ラベル、内箱ラベルの「◆」マーク(赤丸部分)がなくなります。

変更前

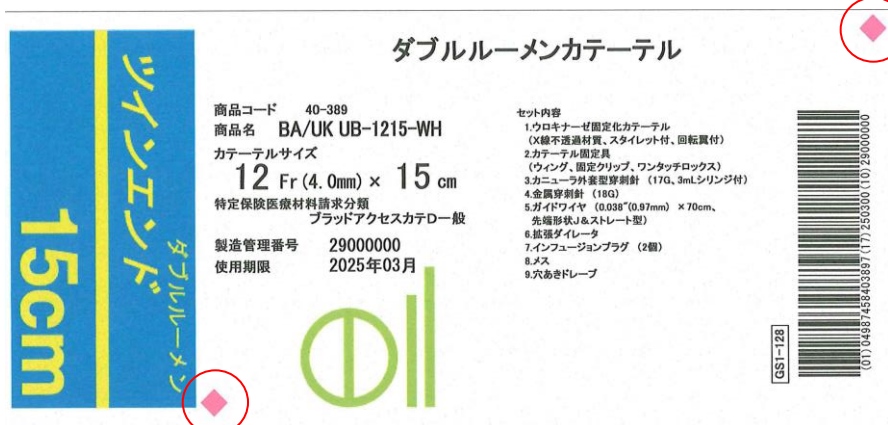

製品ラベル例(左) 、 内箱ラベル例(右)

変更後



製品ラベル例(左) 、 内箱ラベル例(右)

変更予定時期

切替時期 : 2022年9月中旬頃より順次切り替え予定

切替ロット : 通常キット 29207011 ~  
フルキット 30207012 ~

各製品の変更開始ロット及び変更開始時期の詳細につきましては、別途営業よりご案内致します。