

## 「ニプロ輸液セット」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロ輸液セット」の、仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 変更内容

- 輸液セットに付属されている翼付針のチューブ部の仕様を変更いたします。  
 チューブ長を短くして内径を小さくし、プライミングボリュームを減らすことで、間欠投与等の際にも効率的にご使用いただけます。

### 対象製品


JAN コード	商品コード	品番
4987458030253	03025	ISA-200CP22 Z
4987458030260	03026	ISA-200CP23 Z
4987458031328	03132	ISA-100CP22 Z
4987458031335	03133	ISA-100CP23 Z

### 変更ロット及び変更予定時期

品番	変更後ロット	変更予定時期
ISA-200CP22 Z	16J06T1	11 月中旬
ISA-200CP23 Z	16J02T2	10 月下旬
ISA-100CP22 Z	16J06T3	11 月中旬
ISA-100CP23 Z	16J02T1	11 月初旬

### 変更内容

**変更前** 内径：1.35mm、外径：2.40mm、チューブ長：300mm  
 輸液セット全体でのプライミングボリューム：11.1mL

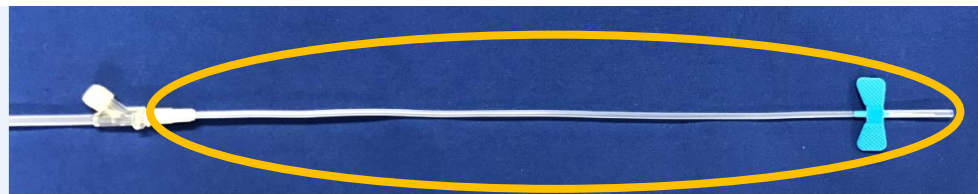

**変更後** 内径：1.13mm、外径：2.15mm、チューブ長：190mm  
 輸液セット全体でのプライミングボリューム：10.9mL

