

## 「ニプロ輸液セット」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロ輸液セット」の、仕様を変更することとなりました。

既に変更品が弊社倉庫より出荷されており、遅れてのご報告になりましたことを、お詫び致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

### 変更内容

- 輸液セットに付属されている翼付針のチューブ部の仕様を変更いたします。  
 チューブ長を短くして内径を小さくし、プライミングボリュームを減らすことで、間欠投与等の際にも効率的にご使用いただけます。

※平成 28 年に 22G 及び 23G 翼付針付きにおいて、既に同様の変更を行っております。

### 対象製品


JAN コード	商品コード	品番
4987458031311	03131	ISA-100CP21 Z
4987458030246	03024	ISA-200CP21 Z

### 変更ロット及び変更予定時期

品番	変更後ロット	変更予定時期
ISA-100CP21 Z	17C03T2	出荷済み
ISA-200CP21 Z	17C21T2	出荷済み

### 変更内容

**変更前** 内径：1.35mm、外径：2.40mm、チューブ長：300mm  
 輸液セット全体でのプライミングボリューム：11.1mL

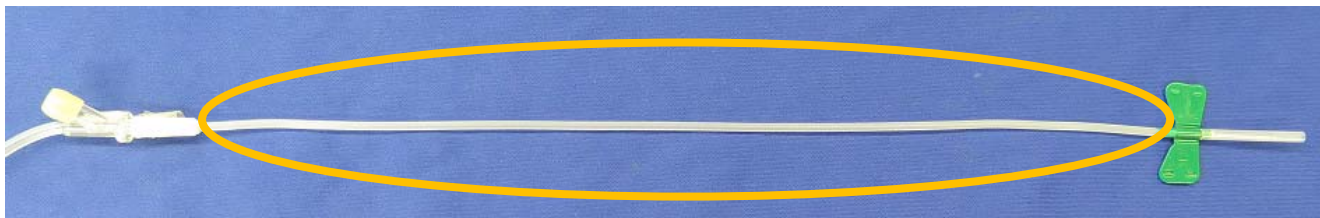

**変更後** 内径：1.13mm、外径：2.15mm、チューブ長：190mm  
 輸液セット全体でのプライミングボリューム：10.9mL

