


ユローズバッグ® UB-AM20 新発売のご案内

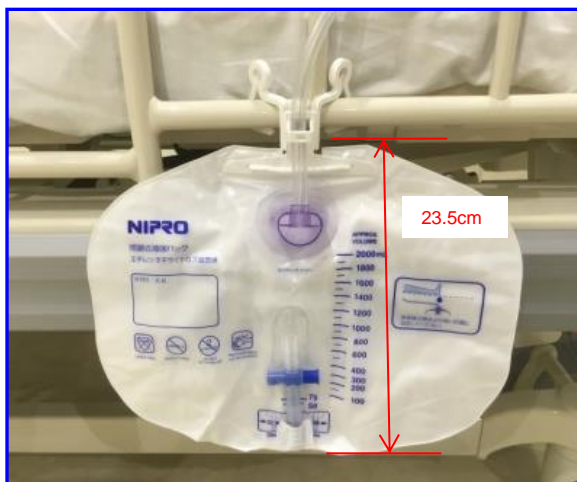

記

特長

- 導尿チューブの内面に設けたリブがチューブのキンク時、尿の流れを保ちます。
- 吊り下げ部分はユニークなハンガータイプを採用、ワンタッチでフィットした固定が可能です。
- 接続コネクタは透明で「ニードルレス採尿ポート」を設けています。
- ドリップチャンバを大きくすることで、バッグに貯まった尿の逆流を軽減します。
- バッグ高さは23.5cmで、低床ベッドでもバッグが床に着かずに使用できます。
- バッグ容量は、最大2,000mLです。
- エチレンオキサイドガス滅菌済みです。

規格

商品コード	品名・規格	梱包単位	JANコード
27-011	ユローズバッグ UB-20AM	50枚(5枚/箱 × 10箱)	4987458270116

参考価格: 2,500円 / 箱

発売時期

平成29年11月13日(月)