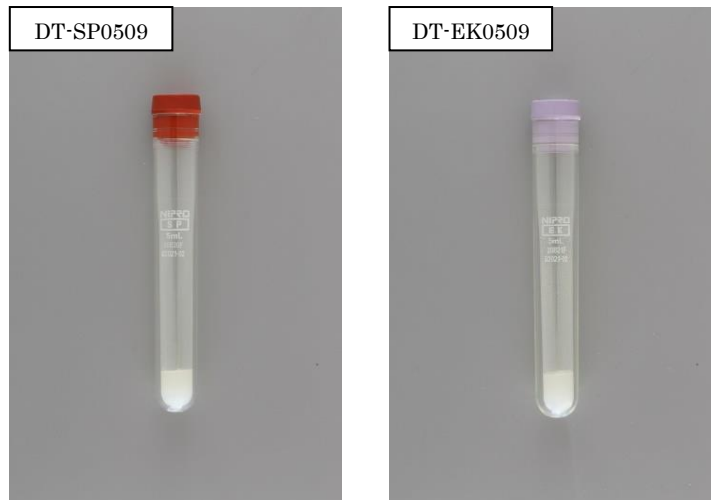


真空密封型採血管

ディープフリーズ[®]採血管 新発売のご案内

特長

※強冷下での凍結保存に対応した採血管です。

※柔軟性のあるインナーチューブを入れた二重構造になっており、搬送時の衝撃・血液の膨張による採血管本体の割れと血液漏れを防ぎます。

※遠心分離した本品は最低温度-80℃で最長3ヶ月間保管できます。

仕様

医療機器認証番号:301AABZX00065000
クラス分類:クラスII(管理医療機器)

商品コード	品名	管容量	採血量	添加剤	入り数
33-251	DT-SP0509	10mL	5.0mL	分離剤、凝固促進剤	1,000本/ケース(100本/箱×10)
33-252	DT-EK0509	10mL	5.0mL	分離剤、EDTA-2K(スプレーコート)	1,000本/ケース(100本/箱×10)

※ DT-SP0509 は凝固促進剤入り、DT-EK0509 は抗凝固剤入りで、DT-SP0509 は血清検体の採取に対応し、DT-EK0509 は血漿検体の採取に対応しています。

※ 受注生産品のため、初回納期3ヶ月、出荷単位は100本/箱からとなります。

発売時期

2023年10月16日発売