

仕様変更のご案内

5%糖液キットH (50mL/100mL)

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、このたびは標題製品の仕様を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白

記


1. 変更内容 (概要)

- (1) 使用性向上のため、製品サイズ・仕様・デザインを変更します。(操作方法に大きな変更はありません)
 また、第十七改正日本薬局方に伴い、製品ラベル、個装箱等に局方名を追加表示します。

変更前		変更後	
50mL	100mL	50mL	100mL
製品ラベル裏面	製品ラベル裏面	製品ラベル裏面	製品ラベル裏面
製品サイズ** 57×154×41 mm (幅×高さ×厚み)	製品サイズ** 65×174×45 mm (幅×高さ×厚み)	製品サイズ** 66×169×45 mm (幅×高さ×厚み)	製品サイズ** 66×169×45 mm (幅×高さ×厚み)

※製品サイズは概略寸法です。 ※変更前品の製品ラベル裏面、および変更品のカバーシール、製品ラベルの画像はイラストです。

(2) 個装箱のサイズ、デザインを変更します。(画像はイラストです)

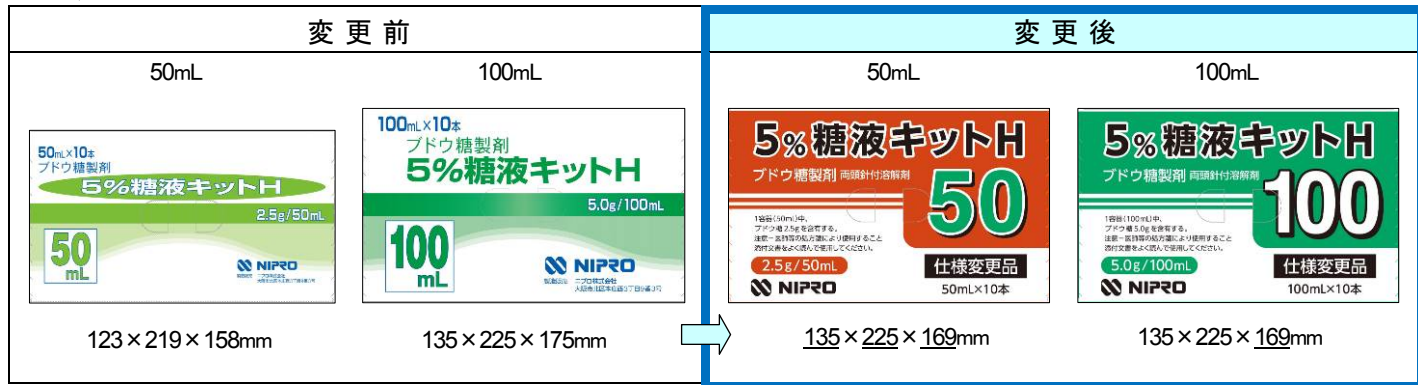

※個装箱に「仕様変更品」の表示を行います。

(3) 個装箱の変更に併せ、外装ケースサイズ、デザインも変更します。(画像はイラストです)




2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット (使用期限)	出荷予定時期
5%糖液キット H (100mL)	100mL×10本	10331	190-10331-4	18L01(2021/6)	2018年9月中旬
5%糖液キット H (50mL)	50mL×10本	10302	190-10302-4	18M01(2021/7)	2019年1月

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上

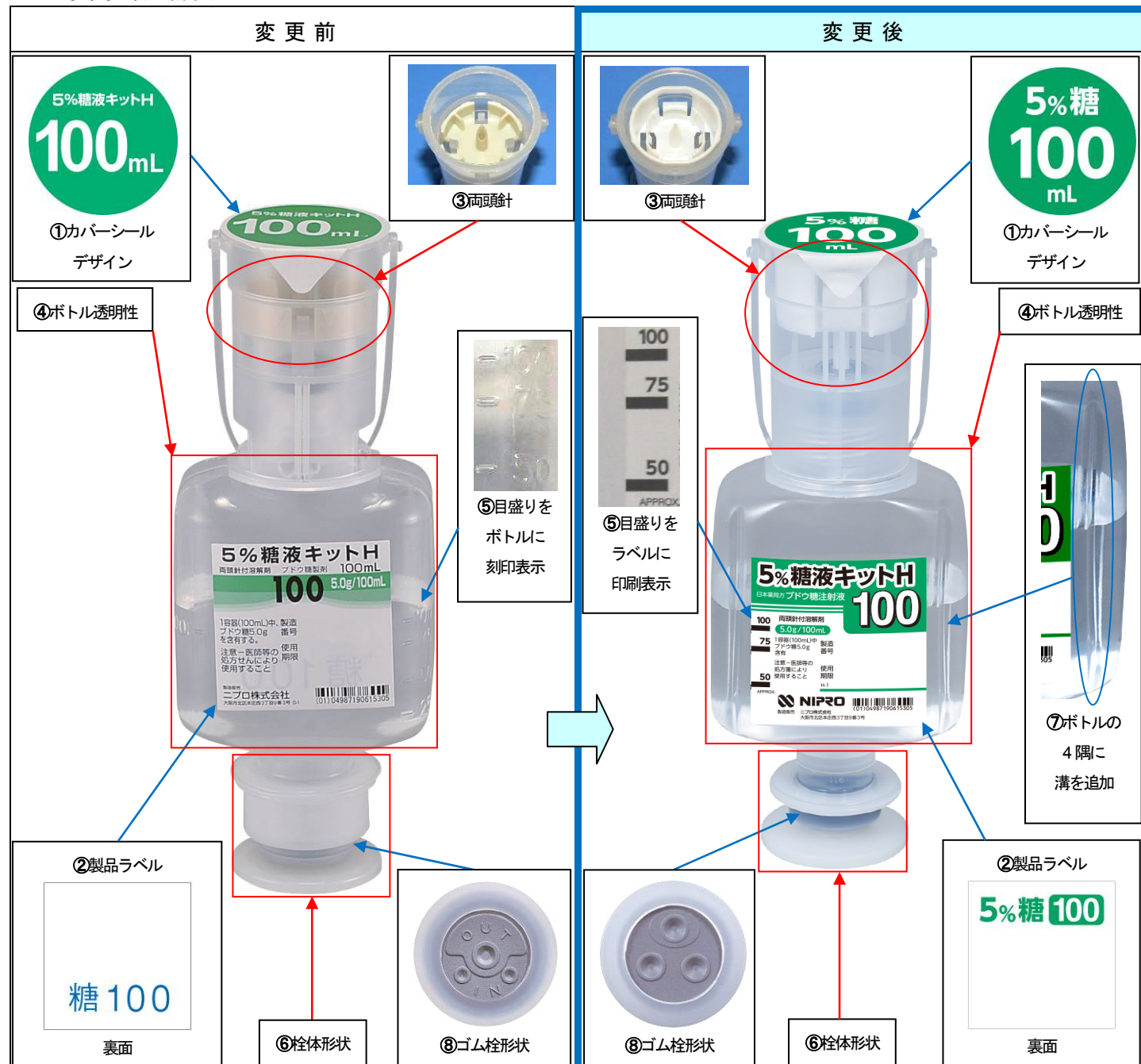

①カバーシールのデザインを変更しました。

②製品ラベルのデザインを変更しました。(裏面のデザインも変更しました)

③両頭針

- ・バイアルに追従する仕様となりました。(バイアル離脱時に両頭針が初期位置に戻るため横置き時に液漏れしません)
- ・針形状を変更しました。(他と併せた複合的な変更により、刺通が容易となりました)
- ・両頭針の外壁が高くなりました。(中心外刺通および斜め刺しのリスクが低減されました)

④ボトルの透明性が高くなりました。(溶解確認が一層容易となりました)

⑤目盛りを「ボトルへの刻印表示」から「ラベルへの印刷表示」に変更しました。(残量[目安]の視認が容易となりました)

⑥栓体形状を変更し、栓体内部の内膜を廃止しました。(刺通時の抵抗が低くなり、残量の少ない仕様となりました)


⑦ボトルの4隅に溝を配しました。(排液時のボトル形状の変形が抑制されます)

⑧ゴム栓の形状を変更しました。(IN/OUT 表示を廃し、1カ所に目印として楕円マークを表示しました)

その他 50mL・100mLは共通サイズとなりました。(製品ラベル、カバーシールのデザインを変更し識別性に配慮しました)

※操作方法はほぼ従来通りです。

50mL 変更内容 (詳細)

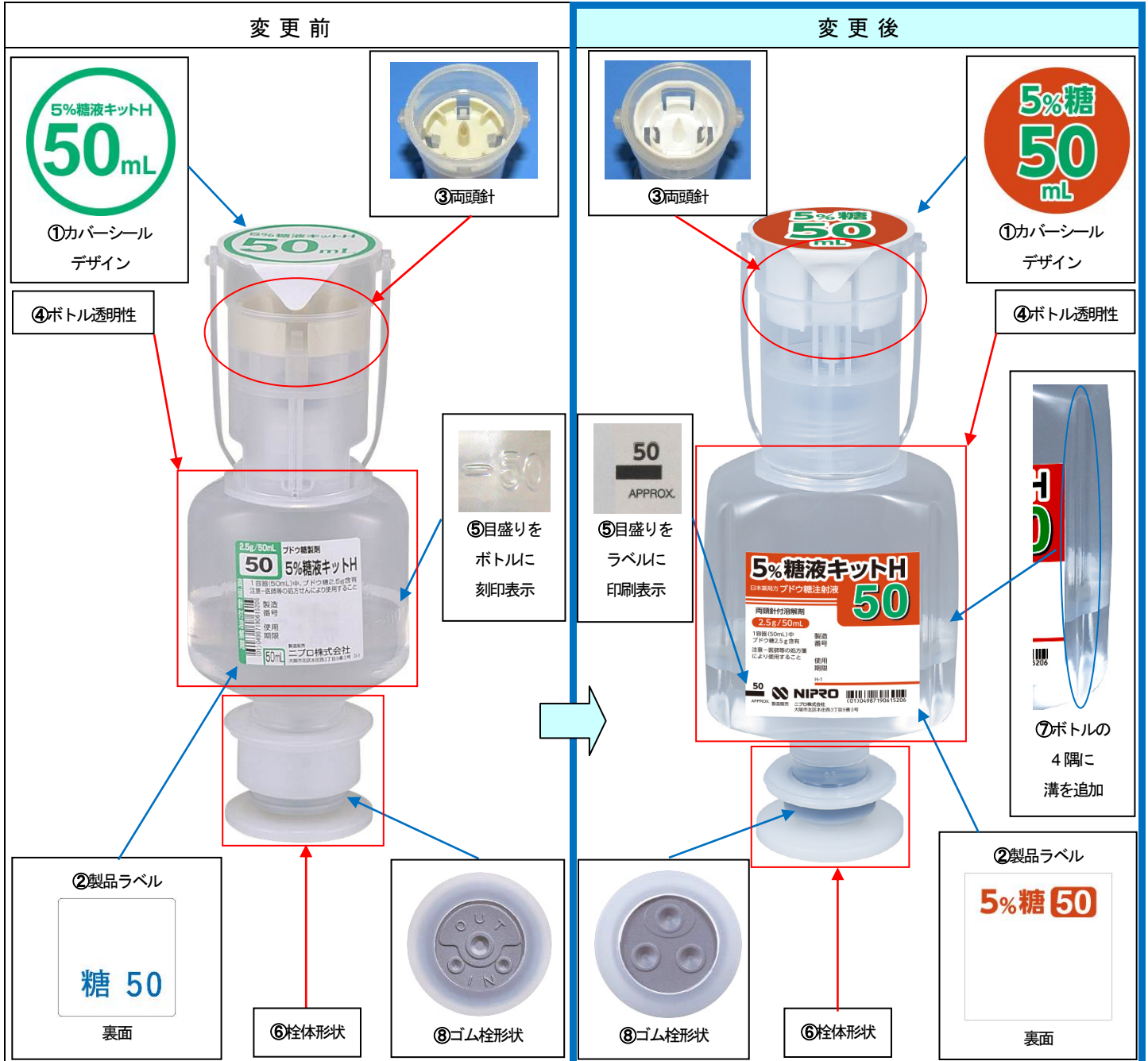

①カバーシールのデザインを変更しました。

②製品ラベルのデザインを変更しました。(裏面のデザインも変更しました)

③両頭針

- ・バイアルに追従する仕様となりました。(バイアル離脱時に両頭針が初期位置に戻るため横置き時に液漏れしません)
- ・針形状を変更しました。(他と併せた複合的な変更により、刺通が容易となりました)
- ・両頭針の外壁が高くなりました。(中心外刺通および斜め刺しのリスクが低減されました)

④ボトルの透明性が高くなりました。(溶解確認が一層容易となりました)

⑤目盛りを「ボトルへの刻印表示」から「ラベルへの印刷表示」に変更しました。(残液量[目安]の視認が容易となりました)

⑥栓体形状を変更し、栓体内部の内膜を廃止しました。(刺通時の抵抗が低くなり、残液量の少ない仕様となりました)

⑦ボトルの4隅に溝を配しました。(排液時のボトル形状の変形が抑制されます)

⑧ゴム栓の形状を変更しました。(IN/OUT表示を廃し、1カ所に目印として楕円マークを表示しました)

その他 50mL・100mLは共通サイズとなりました。(製品ラベル、カバーシールのデザインを変更し識別性に配慮しました)

※操作方法はほぼ従来通りです。